


PROFIL/MAGIC

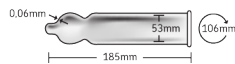


SE. FSU Profil/Magic är kondomer med insvägnd topp för bäst passform och ökad känsla.

NO. FSU Profil/Magic er kondomer med insvingt tupp for bedre passform og økt følsomhet.

DK. FSU Profil/Magic er kondomer med indsnævret top, som giver perfekt pasform og øger følelsen.

FI. FSU Magic/Profil -kondomit ovat puristavat parhaasta paikasta ja tuntuvat hyvältä.

GRANDE

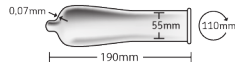


SE. FSU Grande är extra rymliga och säkra kondomer med generös form som ger bättre passform och känsla.

NO. FSU Grande er ekstra romslige og sikre kondomer med avrundet form som gir bedre passform og følelse.

DK. FSU Grande er ekstra rummelige og sikre kondomer i stort format, som giver en bedre pasform og forøget følsomhed.

FI. FSU Grande -kondomit ovat tosittilavia ja varmoja. Suora muoto sopii aina.

THIN

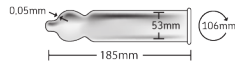


SE. FSU Thin är tunna kondomer för en närmare känsla, nästan som utan.

NO. FSU Thin er tynne kondomer for en nærmere følelse, nesten som uten.

DK. FSU Thin er tynde kondomer, som giver en tættere følelse, næsten som ikke at have noget på.

FI. FSU Thin -kondomit ovat ihanohuita, lähemmäksi et päälle.

NAMNAM

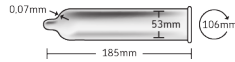


SE. FSU NamNam. Rak, ofärgad latexkondom med slät yta, behållare och glide medel med arom.

NO. FSU NamNam. Rett, ufärgat latexkondom med glatt overflate, beholder og glide meddel med aroma.

DK. FSU NamNam. Ufarvet, lige latexkondom med glat overflade, reservoir og glidecreme med aroma.

FI. FSU NamNam. Väritön, kostea, suora, säileipintainen ja vaniljanmaukainen lateksikondomi säiliöllä.

NÄKKEN

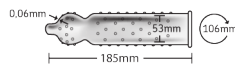


SE. FSU Näkken är kondomer med knottor på för ökad njutning och gör det skönare för båda.

NO. FSU Nökken er kondomer med knudrer som gir økt nytelse for begge.

DK. FSU Nøkken er kondomer med knopper, som øger nydelsen og gør det skønnere for begge parter.

FI. FSU Näkken -kondomien juomupinta lisää nautintoa ja on molempien mieleen.

POWER

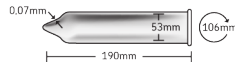


SE. FSU Power – kondomer som kan förstärka erektionen, ge ökad sexuell njutning och mer intensiv känsla.

NO. FSU Power - kondomer som kan forsterke ereksjonen, gi økt seksuell nytelse og mer intensiv følelse.

DK. FSU Power – kondomer som kan forstærke erektionen, øge følsomheden og give større seksuel nydelse.

FI. FSU Power – kondomi, joka voi vahvistaa erektiota sekä lisätä seksuaalista halua ja nautintoa.

TIGHT

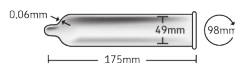


SE. FSU Tight Slim fit är kondomer med en tätt passform.

NO. FSU Tight Slim fit er kondomer med en tettstittende passform.

DK. FSU Tight Slim fit er kondomer med stram pasform.

FI. FSU Tight Slim fit -kondomit on suunniteltu mukavan tiukoiksi.

SO SENSITIVE

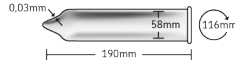


SE. FSU So Sensitive är extra tunna och luktfria plastkondomer som leder kroppsvärme och ger en naturlig känsla. Kan användas av latexallergiker.

NO. FSU So Sensitive er ekstra tynne og luktfrie plastkondomer som leder kroppsvärme og gir en naturlig følelse. Kan benyttes av latexallergikere.

DK. FSU So Sensitive er ekstra tynde og lugtfrie plastkondomer, som leder kroppsvärmen og giver en naturlig følelse. Kan bruges af latexallergikere.

FI. FSU So Sensitive -kondomit ovat erittäin ohuita ja hajuttomia. Ne välttävät kehon lämpöä luonnollisella tavalla ja sopivat myös kumi- ja lateksiallergoille.

17006

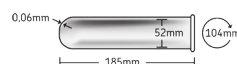


SE. Transparent, rak och slät kondom utan behållare.

NO. Transparent, rett og glatt kondom uten beholder.

DK. Transparent, lige kondom uden glidecreme.

FI. Läpinäkyvä, suora kondomi ilman säiliötä.

TRUE FEELING

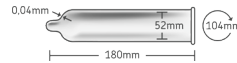

SE. FSU True Feeling är sensationellt tunna kondomer som ger en optimal hudnära naturlig och skön känsla – nästan som utan.

NO. FSU True Feeling er sensasjonelt tynne kondomer som gir en optimal naturlig og deilig nær huden opplevelse – nesten som uten.

DK. FSU True Feeling er sensationelt tynde kondomer som giver en optimal naturlig og skøn følelse – næsten som uden.

FI. FSU True Feeling on seininohut kondomi, joka takaa ainutlaatuisen läheisyyden ja luonnollisen kosketuksen – melkein kuin ilman.

RFSU Vibratorring/ RFSU Kiihotusrengas



SE. RFSU Vibratorring är designad för att ge upp till 45 minuters njutning för både dig och din partner. Den är lätt att sätta på och stänga av efter behov. Batteri ingår men ringen är avsedd för engångsbruk och batteriet kan därför ej bytas. Läs instruktionerna före användning och förvara vibratorringen så att den inte utsätts för solskin eller extrem värme.

NO. RFSU Vibratorring er designet for å gi opp til 45 minutters nytelse for både deg og din partner. Den er enkel å sette på og slå av etter behov. Batteri følger med. Ringen er ment for engangsbruk og batteriet kan derfor ikke byttes. Les bruksanvisningen og oppbevar vibratorringen slik at den ikke utsettes for sollys eller ekstrem varme.

DK. RFSU Vibratorring er beregnet til at give op til 45 minutters nydelse for både dig og din partner. Den er nem at sætte på og slukke efter behov. Batteri er inkluderet, men ringen er beregnet til engangsbrug, og batteriet kan derfor ikke skiftes. Læs instruktionerne for brug, og opbevar vibratorringen, så den ikke udsættes for solskin eller ekstrem varme.

FI. RFSU Kiihotusrengas on suunniteltu tarjoamaan nautintoa sinulle ja kumppanillesi jopa 45 minuutiksi. Se on helppo asettaa paikoilleen tai pysäyttää. Pakkaus sisältää pariston. Koska rengas on tarkoitettu lähinnä kertakäyttöiseksi, sen paristo ei voi vaihtaa. Tutustu ohjeisiin ennen käyttöä ja säilytä rengas suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta.

©2003 Vicon All rights reserved.
Made in Taiwan.



SE. Att använda kondom

Öppna förpackningen som teckningen visar. Använd inga skarpa föremål. Rulla först upp kondomen en bit så att det syns tydligt åt vilket håll den skall rullas på. Kläm behållaren mellan tumme och pekfinger för att få bort luft. Före nära kontakt med din partner, dra tillbaka förhuden och rulla på kondomen försiktigt så den inte rispar av naglarna. Direkt efter utlösningen dras penis ut och hålles noga på plats så att ingen sperma rinner ut. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar mot både graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar. När du använder extra glidmedel ska det vara vatten- eller silikonbaserat t ex RFSU Klick. Använd inte oljebaserat glidmedel som t ex barnolja eller vaselin. Rådfråga läkare eller apotek innan kondom används med salva eller vagitorier för mediciner. RFSUs kondomer håller högsta kvalitet, kontrolleras och testas enligt RFSU normen som tillhör världens strängaste. Överskottet från all försäljning går till information och utbildning i sex- och samlevnadsfrågor, både i Norden och internationellt. Inget preventivmedel är 100% säkert. Kan framkalla allergiska reaktioner hos personer som är överkänsliga mot latex.

Använd kondomen endast en gång.

NO. Å bruke kondom

Pakningen åpnes som vist på tegningen. Bruk ingen skarpe gjenstander. Behandle kondomet varsomt, slik at det ikke skades av negler, smykker e.l. Rull først ut kondomet et stykke, slik at det tydelig vises hvilken vei den skal ruller på. Klem luften ut av kondomet med tommel og pekefinger. Trekk forhuden tilbake og rull på kondomet for det etableres fysisk kontakt med partneren. Unngå å rispe kondomet med neglene eller andre gjenstander. Rett etter utløsning drar du penis langsomt ut og holder kondomet nøy på plass, slik at sæden ikke renner ut. Kondom er det eneste prevensjonsmiddelet som beskytter deg mot både uønsket graviditet og seksuelt overførbare infeksjoner. Når du benytter glidemiddel skal det være vannbasert eller silikonbasert, som for eksempel RFSUs Klick. Bruk ikke oljebasert glidemiddel som for eksempel babyolje, vaselin osv. Spør din lege eller på apoteket hvorvidt kondomer kan benyttes sammen med salve eller vagitorier. RFSUs kondomer er av høyeste kvalitet, og kontrolleres og testes i henhold til RFSU normen som er en av verdens strengeste. Overskuddet fra salget går til informasjon og utdanning i sex- og samlivsspørsmål, både i Norden og internasjonalt. Ingen prevensjonsmiddel er 100% sikre. Kan forårsake allergiske reaksjoner hos personer som er overfølsomme for latex.

Kondomet må kun brukes en gang.

DK. Anvendelse af kondom

Emballagen åbnes som vist på tegningen. Anvend ikke nogen skarpe genstande. Håndter kondomet forsigtigt, så det ikke bliver beskadiget af negle, smykker osv. Rul kondomet en smule ud, så man tydeligt ser, hvilken vej det skal ruller på. Klem luften ud af kondomets reservoir, med tommel- og pegefingre. Træk forhuden tilbage og rul kondomet på den erigerede penis, før der etableres fysisk kontakt med partneren. Undgå at rive kondomet på negle eller andre genstande. Strafs efter udløsningen trækker du langsomt penis ud, mens du holder kondomet på plads, så sæden ikke løber ud. Kondomet er det eneste præventionsmiddel, som beskytter mod både graviditet og seksuelt overførte sygdomme. Når du bruger glidecreme, skal den være vandbaseret eller silikonebaseret, f.eks. RFSUs Klick. Brug ikke oliebaserede glidecremer som f.eks. babyolie, vaseline el. lign. Spørg din læge eller apoteket til råds om, hvorvidt kondomer må anvendes sammen med salve eller vagitorier (indføring af kapsel i skeden). RFSUs kondomer er af højeste kvalitet og kontrolleres efter RFSUs egne standarder, som er blandt verdens strengeste. Overskuddet fra salgskaktiviteterne går til information og oplysning om sex- og samlivsspørsmål, både i Norden og internationalt. Inet præventionsmiddel er 100% sikkert. Kan forårsage allergiske reaktioner hos personer, der er overfølsomme overfor latex.

Kondomet må ikke genanvendes.

FI. Näin käyttää kondomia

Avaa pakkaus piirroksen mukaisesti, älä käytä teräviä esineitä. Pyöritä kondomia hieman auki nähdäkseksi, että se tulee oikein päin. Purista peukalolla ja etusormella ilma pois kondomien kärestä. Vedä sinahka taakse ja pyöritä kondomi paikoiheen ennen intiimiä ihoksketusta. Varo raapimasta kondomia kynsillä. Ota penis hitaasti pois heti siemensyöksyn jälkeen. Varmista, että kondomi pysyy paikollaan eikä spermaa pääse valumaan ulos. Kondomi on ainoa ehkäisyväline, joka suojaa sekä ei-toivotulta raskaudelta että sukupuoliteitse tarttuvilta taudelta. Kun käytät liukuvoidetta, on sen oltava vesipohjaista kuten RFSU Klick. Älä käytä öljypohjaisia aineita kuten vaseliinia, lastenvoideita tai ihovoidetta. Älä käytä kondomia lääkehoidtoon tarkoitettujen voiteiden tai emätinpuikkojen kanssa. Jos olet epävarma, käänny lääkärin tai apteekin puoleen. RFSU-kondomien kestävyyttä ja korkeaa laatua valvotaan ja testataan maailman tiukimpiin kuuluvan RFSU-normin mukaisesti. Myyntivoitto ohjataan seksuaaliasioita ja parisuhdetta koskevaan, sekä Pohjoismaissa että maailmalla tapahtuvaan valistukseen ja tiedottamiseen. Yksikään ehkäisyväline ei takaa 100 % varmuutta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion, mikäli olet herkistynyt lateksille.

Käytä kutakin kondomia vain kerran.

Att använda RFSU Vibratorring

1. Om du använder kondom så sätt på kondomen först.
2. Sätt på vibratorringen på penis så att den kan stimulera klitoris.
3. Sätt på vibratorn genom att trycka in on/off knappen på sidan. För att stänga av dra ut on/off knappen.
4. Njut!
5. Kan tvättas med tvål och vatten efter användning. Stäng av vibratorn före tvätt.

Å bruke RFSU Vibratorring

1. Dersom du bruker kondom, sett på kondomet først.
2. Sett på vibratorringen på penis slik at den kan stimulere klitoris.
3. Sett på vibratoren ved å trykke inn on/off knappen på siden. Dra ut on/off knappen for å slå av.
4. Nyt!
5. Kan vaskes med såpe og vann etter bruk. Slå av vibratoren for rengjøring.

Anvendelse af RFSU Vibratorring

1. Hvis du bruger kondom, skal du sætte kondomet på først.
2. Sæt vibratorringen på penis så den kan stimulere klitoris.
3. Tænd vibratoren ved at trykke på tænd/sluk-knappen på siden. Sluk ved at trykke tænd/sluk-knappen ud igen.
4. Nyd det!
5. Kan vaskes med vand og sæbe efter brug. Sluk for vibratoren inden rengjøring.

Näin käyttää RFSU Kiihotusrengas

1. Jos käytät kondomia, aseta se ensin paikolleen.
2. Ota värievä rengas penisin jotta se voi edistää klitoris.
3. Käynnistä kiihotin painamalla sivulla oleva on/off-painike sisään. Laite suljetaan vetämällä painike ylös.
4. Nauti!
5. Voidaan pestä saippualla ja vedellä käytön jälkeen. Sulje laite ennen pesua.



Tillverkare/Producent/Producent/Valmistaja:
RFSU AB, Box 1279, Färögatan 33, 164 29 Kista,
Sweden. www.rfsu.com
Importör/Maahantuoja: RFSU Norge AS, Oslo,
Valora Trade Danmark A/S, Herlev,
Suomen RFSU Oy, Vantaa/Vanda



ISO 4074